

# Go-box <sup>+</sup>

v011 birt í september 2026,  
Með fyrirvara um breytingar

## Sensotec

Kalfjeslaan 38  
2623AJ Delft  
Holland  
Sími: +31 15 262 59 55  
Netfang: [info@go-box.nl](mailto:info@go-box.nl)  
Vefslóð: [www.go-box.nl](http://www.go-box.nl)

## Blindrafélagið

Hamrahlíð 17  
105 Reykjavík  
Ísland  
Sími: 525 0000  
Netfang: [blind@blind.is](mailto:blind@blind.is)  
Vefslóð: [www.blind.is/gobox](http://www.blind.is/gobox)



© Höfundarréttur 2024

Ekki má afrita eða birta opinberlega neitt af þessu efni með prentun, ljósrítun, örfilmu eða á nokkurn annan hátt án skriflegs leyfis frá Sensotec ([www.sensotec.com](http://www.sensotec.com)).

Sensotec áskilur sér rétt til að breyta útgáfunni hvenær sem er, án fyrirvara.

Nýjustu útgáfu af þessu skjali er að finna á [go4tv.nl](http://go4tv.nl) og [www.blind.is/gobox](http://www.blind.is/gobox)

Rödd virkjuð af Acapela og Ivona

## Efnisyfirlit

|          |                                  |           |
|----------|----------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inngangur</b>                 | <b>3</b>  |
|          | Öryggi                           | 3         |
| <b>2</b> | <b>Hvað er í pakkanum</b>        | <b>4</b>  |
|          | Raðnúmerið                       | 4         |
| <b>3</b> | <b>Uppsetning Go-box+</b>        | <b>4</b>  |
|          | Grunnuppsetning                  | 4         |
|          | Bluetooth heyrnartól             | 5         |
|          | Margir myndlyklar                | 5         |
|          | <b>Ytra hluti</b>                | <b>6</b>  |
|          | Aftan á hliðinni                 | 6         |
|          | Framhlið                         | 6         |
|          | Fjarstýring                      | 7         |
| <b>4</b> | <b>Hvernig á að nota</b>         | <b>8</b>  |
|          | Veldu hljóðúttak og/eða stækkun  | 8         |
|          | Stilla leshraðann                | 8         |
|          | Stilla hljóðstyrk heyrnartólanna | 8         |
| <b>5</b> | <b>Valmynd</b>                   | <b>8</b>  |
|          | Valmynd - Tal - Hljóðstyrkur     | 8         |
|          | Valmynd - Tal - Hraði            | 9         |
|          | Valmynd - Tal - Rödd             | 9         |
|          | Valmynd - Prófilar               | 9         |
|          | Valmynd - Textar - Litur         | 9         |
|          | Valmynd - Textar - Leturgerð     | 9         |
|          | Valmynd - Textar - Stærð         | 9         |
|          | Valmynd - Textar - Jöfnun        | 10        |
|          | Valmynd - Þráðlaust net          | 10        |
|          | Valmynd - Bluetooth              | 10        |
|          | Valmynd - Staða                  | 10        |
| <b>6</b> | <b>Algengar spurningar</b>       | <b>11</b> |
|          | <b>Upplýsingar</b>               | <b>12</b> |

## 1 INNGANGUR

Go-box+ er tæki sem er sérstaklega þróað fyrir blinda, sjónskerta og fólk með lestrarhömlun. Það greinir textana sem koma fyrir í myndefninu og les þá síðan upphátt eða sýnir þá með stærra letri og betri birtuskilum. Tækið hefur aðeins fáar stillingar og eru allar aðgerðir lesnar upp. Því er hægt að stjórna tækinu eingöngu með snertingu og heyrn. Þetta gerir það að nýstárlegu og þægilegu tæki fyrir fólk með sjónskerðingu eða fyrir aldraða án tölvukunnáttu. Tölva er ekki nauðsynleg og Go-box+ er mjög auðvelt í notkun. Internettenging er ekki heldur nauðsynleg, þó að það geti verið gagnlegt að hafa internetið tiltækt fyrir sjálfvirkar uppfærslur.

Go-boxið er sett „á milli“ myndlykils og sjónvarpsins með HDMI-snúru. Sjónvarpið er venjulega tengt við myndlykil með HDMI-snúru. Þessi snúra sem fer í sjónvarpið er nú sett í Go-boxið, sem síðan er tengd aftur við sjónvarpið með snúrunni sem fylgir með í kassanum. Notaðu fjarstýringuna fyrir myndlykilinn til að skipta á milli sjónvarpsstöðva eins og þú ert vanur. Go-boxið fylgir sjálfkrafa völdum sjónvarpsstöðvum.

### Öryggi

**Ætluð notkun:** Að breyta sýnilegum textum í HDMI-merki í lesinn eða breyttan texta.

**Ætluð notkun fyrir aðgengi:** Til að aðstoða blinda og sjónskerta einstaklinga.

**Ætlaður notandi:** Blindur og sjónskertur sjúklingur, frá 12 ára aldri. Möguleg aðstoð við uppsetningu frá ættingjum, vinum o.s.frv.

**Ætlað notkunarumhverfi:** Heimilisumhverfi, daglegt líf.

**Ætlaður sjúklingur:** Sami og ætlaður notandi. Nema ættingjar, vinir o.s.frv.

**Ætlað notkunarskilyrði:** Ætlað til notkunar við venjulegar innanhússaðstæður. Ætlað er að nota við venjulega notkun í 0-8 klukkustundir á dag.

**Geymsluskilyrði:** Sjá kafla Upplýsingar

**Tafla yfir tákn:**

|                                                                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Framleiðandi.                                                                                                                    |
|  | Ekki farga þessari vöru í óflokkað sorp úrgangskerfi.                                                                            |
|  | Vörunúmer.                                                                                                                       |
|  | Raðnúmer.                                                                                                                        |
|  | Conformi té Euro pé enne (Evrópskt samræmi). Þetta tákn þýðir að tækið er að fullu í samræmi við gildandi lög Evrópusambandsins. |
|  | Sambandsfjarskiptastofnun Bandaríkjanna. Þetta tákn þýðir að tækið er að fullu í samræmi við gildandi lög Bandaríkjanna.         |
|  | Uppfyllir reglugerðir sem takmarka eða banna tiltekin efni.                                                                      |
|  | Lækningatæki.                                                                                                                    |
|  | Lestu leiðbeiningarnar í þessari handbók.                                                                                        |
|  | Hugsanleg ósamræmd tíðni.                                                                                                        |
|  | Öruggt geymsluhitastig.                                                                                                          |

**Förgun:** Vinsamlegast skilið Go-boxinu, fylgihlutum og AAA-rafhlöðum sérstaklega á næstu úrgangs- og endurvinnslustöð.

**Tilkynnið öryggismál og skemmdir:** Vinsamlegast tilkynnið öll öryggismál til okkar. Vinsamlegast hafið samband við okkur fyrir notkun ef umbúðir, tæki eða fylgihlutir sýna skemmdir eða eru óvart opnaðir fyrir notkun og ef umbúðirnar eru útsettar fyrir umhverfisaðstæðum sem eru utan almennra útskýringa (sjá kaflann Upplýsingar).

## 2 HVAÐ ER Í PAKKANUM

Pakkinn inniheldur eftirfarandi:

- Go-box með 5V millistykki
- HDMI snúra
- USB heyrnartóla-dongle
- fjarstýring + AAA-rafhlöður
- handbók

### Raðnúmerið

Raðnúmerið. Þetta fimm stafa númer með stóru G á undan (t.d. G12345) er að finna á gerðarplötunni á botni Go-box+, utan á umbúðunum og í stillingavalmyndinni. Þetta raðnúmer er mikilvægt ef þú hefur einhverjar spurningar um þjónustu.

## 3 UPPSETNING GO-BOX+

Go-box+ þarfnast einungis rafmagns og myndlykilstengingar til að byrja að lesa texta fyrir þig. Þessu er lýst í dæminu „Grunnuppsetning“ hér að neðan. Nokkrum öðrum dæmum sem gætu hentað umhverfi þínu eða þörfum betur er einnig lýst.


### Grunnuppsetning

Þetta dæmi lýsir notkun á:

sjónvarp (eða önnur myndbyrtingartæki)

sjónvarp fyrir mynd og hljóð

Taktu HDMI-snúruna fyrir sjónvarpsboxið úr sjónvarpinu og tengdu í HDMI-IN-tengið á Go-box+. Gakktu úr skugga um að upplausnin sé stillt á HD-gæði (1920x1080). Notaðu meðfylgjandi HDMI-snúru til að tengja HDMI-OUT-tengið við HDMI-inntak á sjónvarpinu. Notaðu 5V-straumbreyti til að knýja Go-box+ gegnum rafmagnsinnstungu.

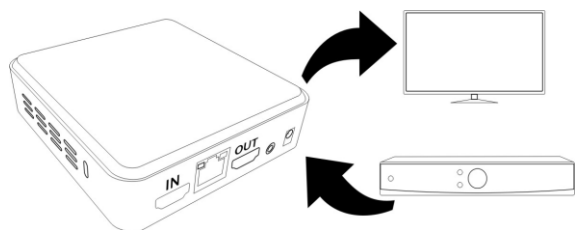


Stilltu sjónvarpið á rétta HDMI-inntakið (þ.e. myndlykilinn) til að horfa á merkið frá sjónvarpsboxinu. Go-box+ gæti sýnt Solutions Radio eða Sensotec-merkið í stutta stund og ræsiskjá. Þá munt þú heyra upplestraða texta úr sjónvarpinu. Ef ekki: Ýttu á [Tal]-hnappinn á fjarstýringunni til að skipta á milli sjónvarps og heyrnartóla og/eða stækkaðs leturs.

Ráð: 3,5 mm hljóðtengið á meðfylgjandi USB-tengistykki er einnig hægt að tengja við heyrnartól fyrir heyrnartæki. Vinsamlegast leitið ráða hjá heyrnarfræðingi.

Ráð: 3,5 mm hljóðtengi USB-tengistykkisins sem fylgir er einnig hægt að tengja við grunnstöð venjulegs **þráðlauss heyrnartóls** (einnig þekkt sem RF-heyrnartól).

## Bluetooth heyrnartól

Go-box getur einnig notað Bluetooth heyrnartól í stað þeirra með snúru.

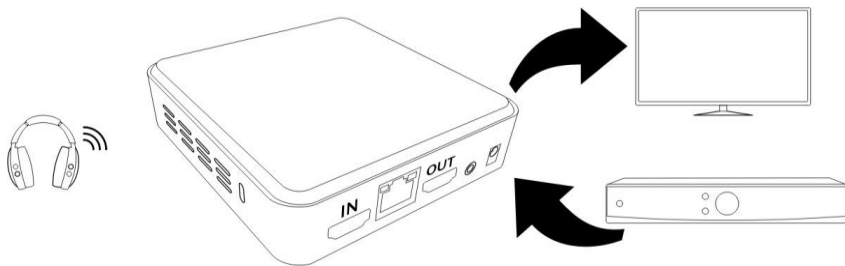


Bluetooth-heyrnartólin verða fyrst að vera tengd (pöruð) við Go-box-tækið: Stilltu heyrnartólin í pörunarstillingu (sjá handbók þeirra). Ýttu á [Valmynd]-hnappinn á fjarstýringunni og veldu „Bluetooth“. Nafn heyrnartólanna ætti nú að birtast á listanum yfir „tæki fundið“. Veldu það nafn og ýttu á [OK]. Ýttu á [Tal]-hnappinn á fjarstýringunni til að skipta um „talútgang“ á milli sjónvarps og heyrnartóla.

## Margir myndlyklar

Go-boxið greinir myndbandið sem kemur inn í HDMI-inntakið til að greina texta. Að skipta um snúrur í þessu inntaki getur verið tímabundin lausn til að nota Go-boxið með mörgum myndgjöfum, en eftirfarandi lýsing útskýrir hvernig á að nota svokallaðan HDMI-rofa. Slíkur rofi fylgir ekki með Go-boxinu, en hægt er að kaupa hann í raftækja- eða tölvuverslunum.

Gakktu úr skugga um að upplausn hverrar myndgjafa sé stillt á HD-gæði (1920x1080). Taktu HDMI-

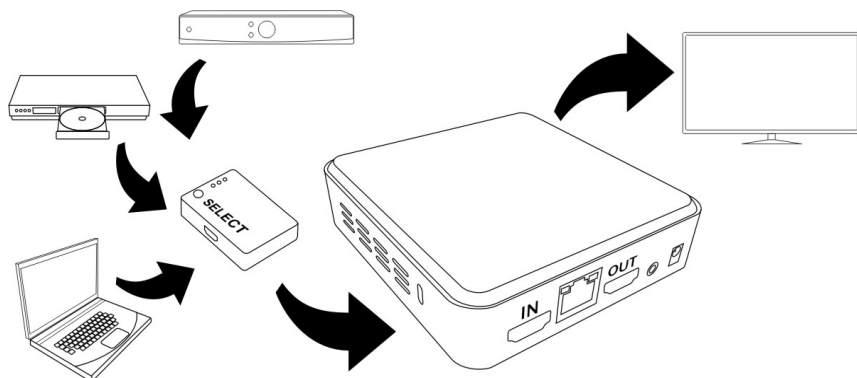

snúrunar þrjár úr sjónvarpinu. Tengdu í inntök HDMI-rofa og tengdu úttakið við HDMI-IN-tengið á Go-box+. Notaðu aðra HDMI-snúru til að tengja HDMI-OUT-tengið á Go-box+ við eitt af HDMI-inntökunum á sjónvarpinu. Stilltu sjónvarpið á rétt HDMI-inntak til að horfa á merkið frá sjónvarpsboxinu.

HDMI-rofinn getur nú valið hvaða myndgjafa þarf að senda í gegnum Go-boxið að sjónvarpinu (sjá einnig handbók HDMI-rofans).

## YTRI HLUTI

### Aftan á hliðinni

Aftan á tækinu eru fimm tengi. Frá vinstri til hægri (þegar aftan á tækinu snýr að þér):


**HDMI-** inntakstengi fyrir HDMI-snúru sem kemur frá myndbandsgjafa eins og DVD-spilara eða myndlykli.

**Nettengi** fyrir netsnúru við staðarnetið þitt.

**HDMI-** útgangstengi fyrir HDMI-snúruna við sjónvarpið þitt.

**IR-sendir** (ekki notaður).


**Rafmagnstengi** (1,3x3,5 mm) fyrir straumbreyti í rafmagnsinnstungu.

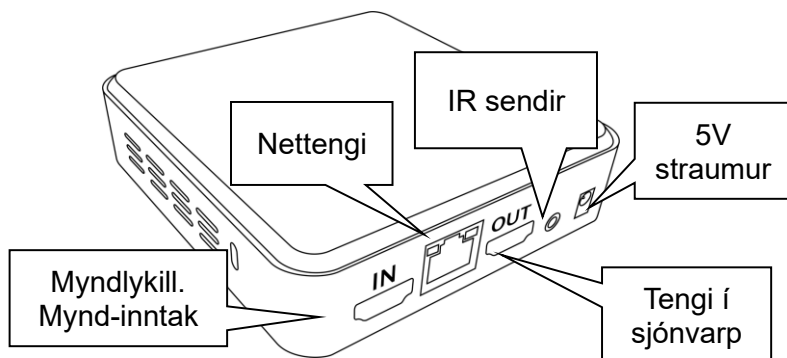

### Framhlið

Framhliðin hefur eftirfarandi eiginleika frá vinstri til hægri:

- Biðhnappur
- Fjarstýringarmóttakari
- SD-kortarauf
- Virkniljós
- Biðstöðu-/rafmagnsljós
- tvö USB-tengi (til að tengja síma með dongle)

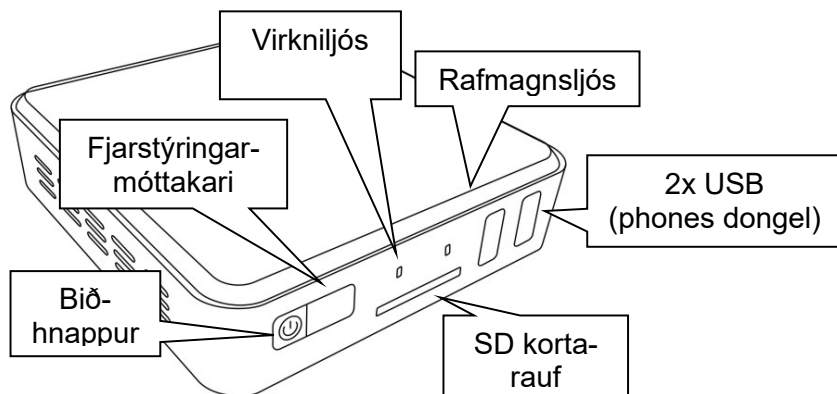

## Fjarstýring

Fjarstýringin hefur 13 hnappa.


[ **Tal** ] er staðsettur efst í vinstra horninu og sendir textana annaðhvort í hátalara sjónvarpsins eða í heyrnartólin í gegnum tækið.

[ **Kveikja** ] hnappurinn er staðsettur efst í hægri horninu. Þessi hnappur slekkur annaðhvort á Go-box+ (í biðstöðu) eða kveikir aftur á honum.

Rétt fyrir neðan þessa hnappa eru tveir [ **Hraði** ] hnappar vinstra megin til að stilla hraðann sem röddin les textana á. Annað þar hægra megin stýrir [ **hljóðstyrk** ] heyrnartólanna.

Neðri helmingurinn hefur 5 hnappa í tígullaga formi þar sem miðhnappurinn er [ **OK** ] hnappurinn til að velja valkost í valmyndinni. Hnapparnir fjórir í kring eru til að fletta **upp**, **niður**, **til vinstri** og **hægri** í gegnum valmyndina.

Síðustu tveir hnapparnir vinstra megin við þessa tígullögun eru til að fara annaðhvort inn í [ **valmyndina** ] (sá efsti) eða fara [ **til baka** ] út (sá neðri).

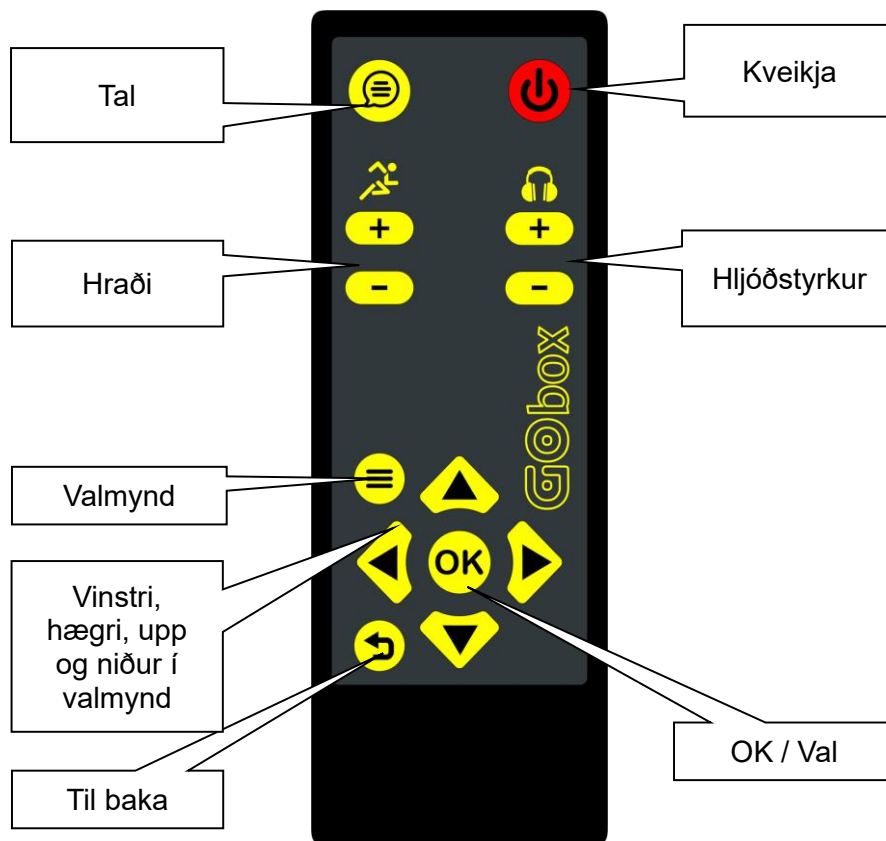

## 4 HVERNIG Á AÐ NOTA

Go-box+ kveikir sjálfkrafa á sér þegar það nemur myndmerki á HDMI-inntakinu. Þú getur líka ýtt á ON-hnappinn á fjarstýringunni.

### *Veldu hljóðúttak og/eða stækkun*

Ýttu á [tal] hnappinn á fjarstýringunni efst í vinstra horninu til að skipta yfir í tengd heyrnartól eða aftur í sjónvarpið og/eða sýna stækkaða leturgerð.

### *Stilla leshraðann*

Sum forrit eða kvikmyndir eru með svo marga texta að þú þarft að láta röddina í Go-box+ lesa þá aðeins hraðar fyrir þig til að fylgjast með.

Þú finnur tvo hnappa vinstra megin á fjarstýringunni sem stjórna þessum hraða. Ýttu á efri [Hraði+] hnappinn til að auka leshraðann og neðri [Hraði-] hnappinn til að minnka hann.

### *Stilla hljóðstyrk heyrnartólanna*


Þú getur tengt heyrnartól við Go-box+ annaðhvort með snúru (3,5 mm tengi í USB-tenginu sem fylgdi með tækinu) eða í gegnum Bluetooth.

Þú finnur tvo hnappa hægra megin á fjarstýringunni sem stjórna hljóðstyrk heyrnartólanna. Ýttu á efri [hljóðstyrk+] hnappinn til að auka hljóðstyrkinn og neðri [hljóðstyrk-] hnappinn til að lækka hann.

Ábending: Hægt er að stjórna blöndunni af upplestri texta og sjónvarpshljóði í valmyndinni Tal - Hljóðstyrkur (sem er óháð hljóðstyrk heyrnartólanna).


## 5 VALMYND

Í Go-box valmyndinni er hægt að breyta stillingum sem venjulega eru einskiptis. Ýttu á [Menu] hnappinn (vinstra megin við [Upp] hnappinn) og notaðu síðan [OK] hnappinn til að velja úr:

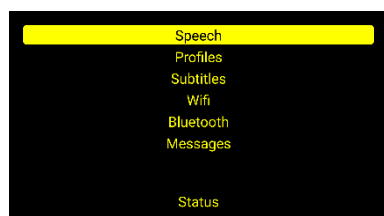


- Tal
- Prófilar
- Þráðlaust net
- Bluetooth
- Go-box

### *Valmynd - Tal - Hljóðstyrkur*

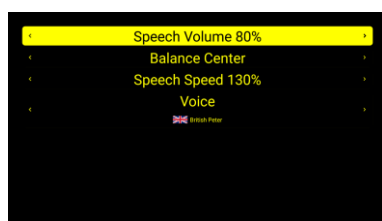


Textarnir verða lesnir á ákveðnum hljóðstyrk miðað við hljóðstyrkinn í myndefninu. Notið [Vinstri] og [Hægri] hnappana til að stilla rétt (t.d. 50%) og ýtið síðan á [Valmynd] eða [Til baka] til að fara úr valmyndinni. Athugið: Upprunalegur hljóðstyrkur sjónvarpsins verður lækkaður meðan textinn er lesinn.

### *Valmynd - Tal - Jafnvægi*

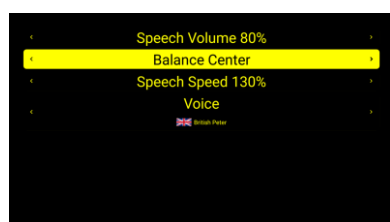


Röddin sem les textana heyrir báðum megin eða bara vinstra eða hægra megin í hátalaranum/heyrnartólunum. Notið [Vinstri] og [Hægri] hnappana fyrir hægri stillinguna (t.d. miðju) og ýtið síðan á [Valmynd] eða [Til baka] til að fara úr valmyndinni.

## Valmynd - Tal - Hraði

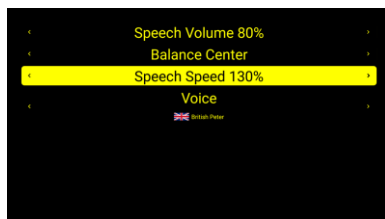


Hægt er að stilla röddina sem les textana á hærri eða lægri hraða eftir smekk eða hraða textans sem birtist í sjónvarpinu. Notið [Vinstri] og [Hægri] hnappana til að stilla rétt (t.d. 120%) og ýtið síðan á [Valmynd] eða [Til baka] til að fara úr valmyndinni.

## Valmynd - Tal - Rödd

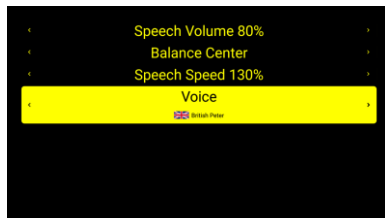

Hægt er að velja röddina sem les textana, t.d. til að velja karlkynsrödd í stað kvenkyns. Notið [Vinstri] og [Hægri] hnappana fyrir hægri stillinguna (t.d. Dóra) og ýtið síðan á [Valmynd] eða [Til baka] til að fara úr valmyndinni.

## Valmynd - Prófílar

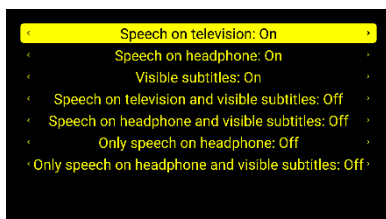

Prófílarnir velja stillingar fyrir upplestur texta í hátalara sjónvarpsins eða í heyrnartólin, velja hvort hætta eigi að hlusta á sjónvarpshljóðið („Aðeins tal“) og velja hvort virkja eigi stækkaða texta. Með [Tal]-hnappinum efst til vinstri á fjarstýringunni er síðan valið prófílar.

## Valmynd - Textar - Litur




Go-boxið getur sýnt stækkaða texta í mismunandi litasamsetningum. Notaðu [Vinstri] eða [Hægri] hnappinn til að velja litasamsetningu sem þér finnst þægileg að lesa. Dæmi um texta birtist neðst á skjánum.

## Valmynd - Textar - Leturgerð



Go-boxið getur sýnt stækkaða texta í mismunandi leturgerðum. Notaðu [Vinstri] eða [Hægri] hnappinn til að velja letur sem þér finnst þægilegt að lesa. Dæmi um texta birtist neðst á skjánum.

## Valmynd - Textar - Stærð

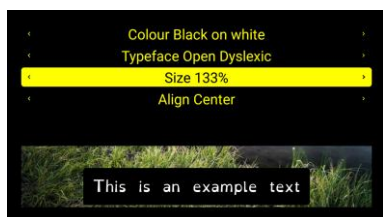

Go-boxið getur sýnt texta í mismunandi stærðum. Notaðu [Vinstri] eða [Hægri] hnappinn til að velja stærð sem þér finnst þægilegt að lesa. Dæmi um texta birtist neðst á skjánum.

## Valmynd - Textar - Jöfnun



Go-boxið getur sýnt stækkaða texta, annaðhvort vinstri- eða miðjujafnaða. Notaðu [Vinstri] eða [Hægri] hnappinn til að velja þá röðun sem þér finnst þægileg að lesa. Dæmi um texta birtist neðst á skjánum.


## Valmynd - Þráðlaust net



Hægt er að tengja Go-boxið við internetið svo það geti til dæmis sótt tiltækar hugbúnaðaruppfærslur. Þetta er hægt að gera annaðhvort beint með netsnúru eða í gegnum þráðlaust net.

Veldu netið þitt (einnig þekkt sem SSID) í listanum, ýttu á [OK] hnappinn og sláðu inn lykilorðið (einnig þekkt sem WPA-lykill).

Að slá inn lykilorðið þitt (WPA-lykill): Notaðu [upp] og [niður] hnappana til að fletta fyrst í gegnum lágstafi, síðan hástafi og að lokum tölustafi og sérstafi eins og „upphrópunarmerki“ eða „bil“. Á endanum á listanum er hægt að velja „Lokið“. Ýttu á [OK] eða [HÆGRI] hnappinn þegar þú finnur réttan staf.

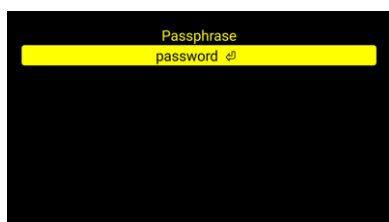


Ýttu á [TIL BAKA] eða [VINSTRI] hnappinn til að leiðrétta rangan staf. Þú þarft að finna á endanum „Lokið“ til að staðfesta lykilorðið og ýttu þá á [OK] hnappinn.

Textinn „Tengt“ mun nú birtast við hliðina á netkerfisnafninu þínu. Þú gætir viljað endurnýja listann með því að ýta á [TIL BAKA] og velja „Þráðlaust net“ til að sjá hvort „tengdur“ birtist við nafnið á netinu.

Ráð til að fjarlægja netstillingu: Farðu í valmyndina „Þráðlaust net“ og færðu gula stikuna yfir það net sem þú vilt fjarlægja og haltu niðri [TIL BAKA] hnappnum í 3 sekúndur.

## Valmynd – Bluetooth

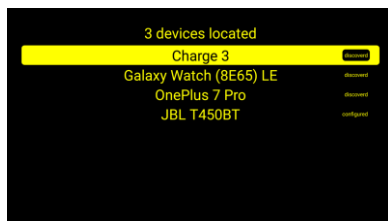

Gakktu úr skugga um að Bluetooth-tækið þitt sé í svokölluðum „pörunarham“ (sjá handbók þess). Go-box byrjar að leita að Bluetooth-tækjum sem eru í „pörunarham“ þegar þú opnar Bluetooth-valmyndina.

Veldu tækið þitt og ýttu á [OK] hnappinn. Talskilaboð sem segja „...tengt“ munu heyrast í Bluetooth tækinu þínu. Ýttu á [VALMYND] eða [TIL BAKA] til að fara úr valmyndinni.

Ráð til að fjarlægja Bluetooth-tæki: Farðu í „Bluetooth“-valmyndina og færðu gulu stikuna að því Bluetooth-tæki sem þú vilt fjarlægja og haltu niðri [TIL BAKA]-hnappnum í 3 sekúndur.

## Valmynd - Staða



Go-box+ valmyndin sýnir þér stöðu leyfisins og nokkrar kerfisupplýsingar eins og myndgæði myndlykils (x1080 er æskilegt), hugbúnaðarútgáfu og raðnúmer.

## 6 ALGENGAR SPURNINGAR

Ef þú hefur einhverjar spurningar eða vandamál með Go-box+ skaltu fyrst lesa eftirfarandi algengar spurningar:

### **Af hverju eru ekki öll orðin í textanum lesin upp fyrir mig eða heyri ég bara nokkur brot?**

Myndgæði (upplausn) myndlykilsins eru hugsanlega ekki rétt stillt enn. Farðu í stillingarvalmynd myndlykilsins og settu myndgæðin á 1080p eða 1080i.

### **Get ég líka notað Go-boxið þegar ég er bara með sjónvarp án utanaðkomandi myndlykils eða annað efnistæki?**

Go-boxið virkar ekki beint við sjónvarpið, t.d. með CI+ einingu eða með því að nota efnisveitur í sjálfu snjallsjónvarpinu beint. Það þarf að vera utanaðkomandi myndlykill til að geta notað Go-boxið.

### **Get ég líka notað heyrnartól til að hlusta á Go-boxið með heyrnartækinu mínu?**

Þú getur tengt heyrnartækjakerfið þitt við 3,5 mm tengið eins og þú myndir tengja það við sjónvarpið þitt. Sum önnur heyrnartækjakerfi eru með svokallaðan „streymisspilara“ sem getur tengst Go-boxinu eins og Bluetooth-heyrnartól.

### **Græna ljósið á Go-boxinu lýsir ekki upp þegar ég kveiki á sjónvarpinu og myndlyklinum. Hvað geri ég?**

Athugaðu hvort rafmagns-millistykkið sé rétt tengt. Ef svo er: Athugaðu hvort önnur tæki sem hafa verið tengd við sömu rafmagnsinnstungu virki einnig. Go-box þarf einnig að minnsta kosti eitt af HDMI-tengjunum sínum til að sjá virkt tæki, svo vertu viss um að myndlykillinn og sjónvarpið séu rétt tengd og að kveikt er á þeim.

### **Ég horfi líka á efni eftir pöntun eins og Netflix eða HBO. Hvernig virkar það með Go-box?**

Auðveldasta leiðin er að fá myndlykil frá sjónvarpsveitunni þinni sem getur einnig streymt slíku. Annar möguleiki væri að ræsa þjónustuna á eftirspurn í snjallsímanum þínum eða tölvunni og streyma því síðan í Chrome Cast sem er tengdur við Go-boxið. Þriðji möguleikinn er að tengja tölvuna þína við HDMI-inntak Go-boxsins.

### **Hvernig skipti ég á milli sjónvarpsstöðva?**

Þú skiptir um sjónvarpsrás eins og þú ert vanur með fjarstýringunni á myndlyklinum þínum. Go-boxið þarf að virkjust þegar skipt er um rás og heldur svo einfaldlega áfram að lesa texta af næstu rás sem fer í gegnum HDMI-snúruna.

### **Get ég líka notað gervihnattasjónvarpsveituna mína í stað kapalsjónvarps?**

Já, þú getur líka notað gervihnattamyndlykil svo lengi sem hann er með HDMI-úttak í 1080 upplausn.

### **Textinn er ekki lesinn upp þótt hann sjáist á sjónvarpsskjánum.**

Þú gætir þurft að ýta á [tal] hnappinn efst í vinstra horninu á fjarstýringunni til að skipta á milli sjónvarpshátalara og heyrnartóla.

## UPPLÝSINGAR

### Net

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Samskiptareglur    | IPv4 og IPv6                     |
| Ethernet           | 10/100/1000M tengi               |
| Tengigerð          | RJ45 með snúrugreiningu          |
| Þráðlaust net/WiFi | IEEE802.11ac (2,4 GHz + 5,0 GHz) |
| dulkóðun           | WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPS-PB  |

### USB

- 1x USB v2.0 háhraða gerð A
- 1x USB v3.0 háhraða gerð A

### SD

- 1x SD rauf (flokkur 2, 4, 6) SDSC, SDHC (hámark 32GB)

### HDMI

- HDMI tengið styður HDCP v2.0
- 1x HDMI inntak + 1x HDMI úttak (fyrir HD, full-HD eða 4K sjónvarp)

### Heyrnartól

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Tengi            | Lítill tengi 3,5 mm (í gegnum USB-millistykki) |
| Stillanlegt stig | 2x 100 mW (2x 8 Ohm)                           |
| Bluetooth        | v4.2 Class2, A2DP snið                         |

### Almennt

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Aflgjafi         | 5,0V-2A (1,3x3,5mm DC tengi)               |
|                  | 100-240 V, 50-60 Hz millistykki fylgir með |
| Fjarstýring      | 13 hnappar, 140x49x20mm, 2xAAA rafhlöður   |
| Rekstrarhitastig | -10°C til +40°C                            |
| Geymsluhitastig  | -20°C til +60°C                            |
| Stærð            | 100x106x28 mm                              |
| Þyngd            | 204 g                                      |
| Samþykki         | CE, FCC                                    |